



Restauri completi in una sola visita:
ora più veloci di sempre

CEREC TesserTM

Disilicato di litio evoluto


I blocchetti CEREC Tesser hanno una struttura evoluta a matrice di cristallo disilicato di litio + virgilite, il che permette estetica straordinaria, resistenza superiore e cottura superveloce:

- Cottura in 4:30 minuti*
- Resistenza alla flessione >700 MPa
- 1,00 mm di preparazione

È una questione di tempo.

www.dentsplysirona.com/CERECTesser

*Il tempo di cottura di 4:30 minuti si ottiene con il forno CEREC SpeedFire. CEREC Tesser può essere cotto in circa 12 minuti anche nei forni da ceramica tradizionali.

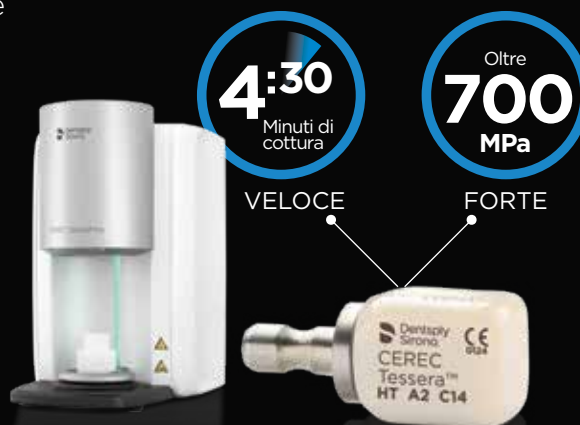

CEREC Tessera™

Disilicato di litio evoluto



Cottura in 4 minuti e 30 secondi

Dite addio ai tempi di cottura in doppia cifra e passate a fare odontoiatria in un singolo appuntamento: veloce ed efficiente. CEREC Tessera è il blocchetto CEREC che tutti aspettavano.



Resistenza maggiore per successo a lungo termine

La microstruttura fitta di cristalli interconnessi è alla base dell'elevata resistenza alla flessione dei blocchetti CEREC Tessera e riduce la diffusione delle spaccature.

> **700** MPa


Processo snello ed efficiente

Dalla preparazione al posizionamento, CEREC Tessera rende tutto più veloce. Molaggio, glasura e cottura, poi cementazione.




Molaggio

Usare frese diamantate standard.

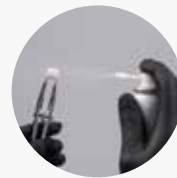

Glasura

Applicare la glasura spray per coprire in modo omogeneo l'intera superficie esterna.

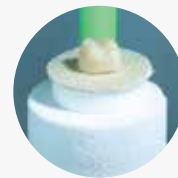

Cottura

La microstruttura fitta di cristalli interconnessi è alla base dell'elevata resistenza alla flessione dei blocchetti CEREC Tessera e riduce la diffusione delle spaccature.

Un singolo blocchetto, tante indicazioni



Corone anatomiche complete



Intarsi inlay



Intarsi onlay



Faccette

Due opzioni di cementazione in base alla preparazione

La scelta di riduzione di 1,0 mm o di 1,5 mm offre al clinico diverse opzioni di cementazione: convenzionale, adesiva e universale/autoadesiva.

Per maggiori informazioni e per ordinare, contatta direttamente il tuo rappresentante Dentsply Sirona.



©2020 Dentsply Sirona Inc. All rights reserved. MLIN0080F